

# macroman™



## 电动助吸器

优化控制  
精确移液



- | 最佳速度控制
- | 使用舒适
- | 操作简单快捷
- | 流量范围宽



## 最佳速度控制

吸液和排液速度可通过压力敏感型按钮来控制,也可以在移液时通过指轮来设置。速度可调,最高速度在3秒能吸液25ml。

屏幕持续显示电池状态以及吸液和排液速度设置。

## 使用舒适

MACROMAN手柄符合人体工程学设计,可防止手部疲劳,配备宽型吸排液按钮,可实现最大舒适性和无压力移液。

锂离子电池使用时间更长,无振动,充电时间减少。

## 流量范围宽


从逐滴排液到快速排液,通过选择流量模式来提高精度。

## 方便存放

所有支架均包含在MACROMAN中,可稳定且方便地将MACROMAN放置在工作台上。

MACROMAN还具有一个集成式可调侧面支架。

配备充电支架,可以随时充电。

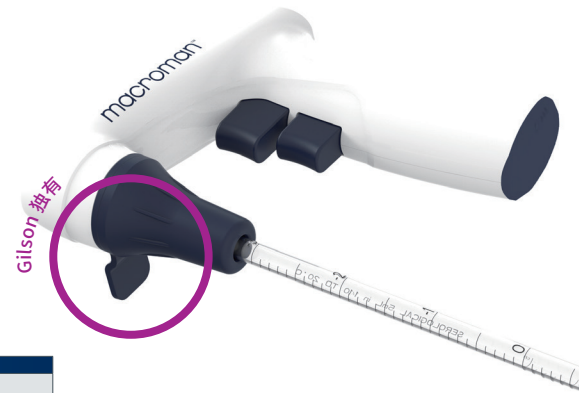

## 技术规格

重量	205g
电池	3.7 V/2800 mAh锂离子充电电池
高温高压灭菌	喷嘴和硅胶接头 (121 °C, 20分钟, 1 mPa)
过滤器	PTFE标准或无菌疏水膜过滤器, 0.22 µm或0.45 µm
适用移液管类型	玻璃或塑料, 1 mL至100 mL
电源	输入电压: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz, 0.3A 输出电压: 5 VDC, 500 mA 中心正极直流连接器
认证	CE, EMC, RoHS, WEEE
配置	MACROMAN、用户指南、通用电源 (4个适配器)、充电台支架、壁挂支架、0.22µm疏水无菌过滤器

型号	容积范围	货号
MACROMAN	0.1 至 100 mL	F110120

### Gilson 区域代理商:

#### Gilson 上海

上海浦东大道720号国际航运金融大厦18层A座  
Tel: 021-50366036 | Fax: 021-58598869 | E-mail: china@gilson.com  
www.gilsoncn.com

#### Gilson Hong Kong

Room 2001-02, 20th floor, Remington Centre 23 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong  
Tel: + 852 2110 5726 | Fax: +852 2111 4065 | E-mail: infohk@gilson.com

#### Gilson S.A.S.

19, avenue des Entrepreneurs BP 145, F-95400 Villiers-le-Bel, FRANCE  
Tel: +33(0)13429 000 | Fax: +33(0)134295020

1804MLH002

© 2018 Gilson | 彩页印刷于2018年4月, 产品信息可能会发生改变, 不提前通知, 所有内容禁止未经授权复制或用于商业用途。

ISO 9001  
CERTIFIED



官方网站



关注有礼